

WIDEX DRAAGBARE OPLADER

**BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN**

- Elegant design
- Zakformaat
- Kan worden gevoed via verschillende voedingsbronnen
- Na 3 jaar gebruik: minimaal 3 keer opladen voor 2 hoortoestellen

BESCHRIJVING

De WIDEX draagbare oplader WPP401 is ontworpen om twee WIDEX MRRLD hoortoestellen op te laden.

Deze oplader heeft voor elk hoortoestel aparte laadstations, een speciaal compartiment voor de telefoons en een interne batterij, voor een gegarandeerd storingsvrije ervaring.

Het ledlampje vóór elk laadstation geeft de laadstatus van het bijbehorende hoortoestel aan.

Drie ledlampjes aan de onderkant van de oplader geven het laadniveau en de laadstatus van de interne batterij aan.

De oplader kan permanent met de netvoeding worden verbonden of draadloos worden opgeladen met behulp van een draadloze Qi opplaadmat. De oplader kan ook als powerbank worden gebruikt, voor het mobiel opladen van uw hoortoestellen.

Aan de onderkant van de oplader zit een aan/uit-knop, waarmee u de oplader kunt uitzetten wanneer u deze voor langere tijd wilt opbergen.

EIGENSCHAPPEN

Kleur:	Black en warm platinum (metallic)
Afmetingen:	Hoogte: 60 mm Breedte: 86 mm Diepte: 32 mm
Gewicht:	ca. 75 g
Gebruiksomstandigheden	Temperatuur Opladen via USB 10-35 °C (50-95 °F) Draadloos opladen 10-30 °C (50-86 °F) Vochtigheid 20-75% rH
Opslagomstandigheden	Temperatuur 10-40 °C (50-104 °F) Vochtigheid 10-80% rH
Vervoersomstandigheden	Temperatuur: -20-60 °C (-4-140 °F) Vochtigheid 5-90% rH


NETSPANNING

Input	Type: DC, gestabiliseerd 5V +/-5% Min. stroom: 500 mA Connector USB C Er kunnen verschillende voedingen worden gebruikt (zie de gebruiksaanwijzing). Het hoortoestel kan warm worden tijdens het opladen
	Draadloos Qi-gecertificeerde opplaadmat
Ingebouwde batterij	Capaciteit: 650 mAh, looptijd : min. 4 dagen bij gewoon gebruik Oplaadtijd ong. 4 uur - USB C ong. 6 uur - draadloos

VERWIJDEREN

- Verwijder de oplader (nieuw of gebruikt) niet via het gewone huishoudelijke afval.
- De oplader moet als elektronisch of chemisch afval worden verwijderd in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

1. Deksel
2. Laadstation hoortoestel links
3. Laadstation hoortoestel rechts
4. Compartiment voor de telefoons
5. Indicatielampjes laadstatus hoortoestel
6. Indicatielampjes status interne accu
7. USB-C poort
8. Aan/uit-knop

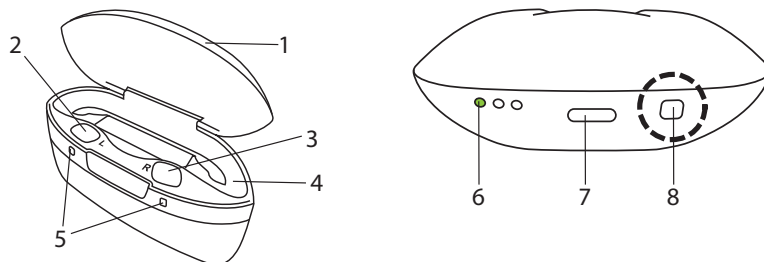

IN DE VERPAKKING

In de verpakking wordt meegeleverd:

- Eén oplader
- Eén adapter
- Eén USB-kabel
- Gebruiksaanwijzing